UN SOFFIO DI BENESSERE

Pressoterapia domiciliare realmente sequenziale.

Apparecchio ad uso domiciliare

4 settori di uscita raddoppiabili

Ciclo operativo realmente sequenziale

Regolazione fine della pressione

Sistema D.A.S.C.* per una pressione perfettamente omogenea in tutti i settori

Sacche interne ai gambali e bracciali parzialmente sovrapposte

Sostituzione individuale di ciascun settore senza sostituzione dell'intero gambale o bracciale

Gambali e bracciali interamente cuciti a mano

Apparecchiatura interamente prodotta e assemblata in Italia

Marchio CF medicale


Ente certificatore 0476



Il medico consiglia

Pressione di lavoro mm HG

Durata seduta minuti

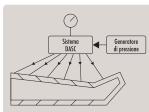

*Il sistema D.A.S.C., esclusiva Fisiopress, collega internamente all'apparecchio tutti i settori man mano che si gonfiano al fine di mantenere perfettamente omogenea la pressione all'interno del gambale o del bracciale.



Sistemi per la prevenzione e la terapia ad uso professionale e domiciliare

Sede legale e amministrativa via G. Boni 20 63017 Porto San Giorgio - Ascoli Piceno telefono 0734 676524 fax 0734 678128

Sede commerciale e produzione via Mori 6 - località Prunaro 40054 Budrio - Bologna telefono 051 6920809 fax 051 6931222

email info@fisiopress.com www.fisiopress.com



Come risolve i problemi

L'apparecchio FP4 MINI interviene in maniera fisiologica sull'arto trattato operando un massaggio realmente sequenziale (vedi ciclo di funzionamento) omogeneo e costante nella direzione naturale dei fluidi drenati, dalla periferia dell'arto alla base dell'arto stesso. È importante che la compressione venga effettuata in quella unica direzione, con continuità, omogeneità e con pressioni adequate seguendo le indicazioni del proprio medico o dello specialista. L'azione si realizza attraverso il progressivo gonfiarsi di un certo numero di sacche, contenute in modo particolare all'interno di gambali e bracciali, opportunamente dimensionati in forma anatomica. Una volta indossati e collegati all'apparecchio eserciteranno sull'arto trattato un massaggio che sarà tanto più efficace se la sua modalità seguirà esattamente quanto descritto nel paragrafo successivo.

Ciclo di funzionamento

Per poter effettuare un perfetto drenaggio l'apparecchio FP4 MINI ha un ciclo operativo definito realmente sequenziale (figura A), infatti la fase compressiva inizia con il gonfiaggio del primo settore 1 (quello più periferico) e prosegue con il secondo 2, mantenendo in pressione il primo, poi con il terzo 3, mantenendo in pressione i primi due e termina con il quarto 4, mantenendo sempre in pressione i precedenti. Quando quest'ultimo ha raggiunto

la pressione desiderata, allora tutti

i settori si saonfiano 5 per qualche

ricomincia da capo 6.

secondo fin quando il ciclo compressivo

Settori parzialmente sovrapposti

Al fine di dare la massima continuità al massaggio, i settori interni all'apparecchio FP4 MINI sono mantenuti paralleli e parzialmente sovrapposti da una struttura a spina di pesce (figura B): in questo modo non si crea alcuno spazio tra un settore e l'altro durante il gonfiaggio. Inoltre, in caso di necessità, possono essere sostituiti individualmente senza sostituire l'intero gambale o bracciale.

Al termine di ciascun trattamento la sensazione di benessere è netta, l'arto trattato è indubbiamente più leggero e la riduzione volumetrica è progressiva, trattamento dopo trattamento. È importante, al fine di ottenere i migliori risultati, seguire le indicazioni mediche, relative al valore di pressione da impostare, sulla durata e frequenza della seduta o sugli eventuali presidi da associare (calze compressive, linfodrenaggio, farmaco).

Benefici ottenibili

Venti o trenta minuti al giorno di trattamento (non necessariamente tutti i giorni) garantiscono una progressiva riduzione e risoluzione del problema, esercitando non solo un'azione terapeutica, ma anche una continua prevenzione con un conseguente stato di benessere fisico ed un evidente miglioramento estetico.

Il sistema FP4 MINI ha 4 settori di uscita, raddoppiabili tramite set di duplicazione che permette l'uso contemporaneo di due gambali o due bracciali. La dotazione dell'apparecchio FP4 MINI,

a seconda dell'esigenza dell'utilizzatore,

può comprendere:

- o singolo gambale
- o singolo gambale e fascia addominale
- o doppio gambale
- o doppio gambale e fascia addominale
- o singola fascia addominale
- o singolo bracciale
- o doppio bracciale





Inizio gonfiaggio tratto iniziale





etamento gonfiaggio tratto iniziale

Nuovo inizio gonfiaggio tratto iniziale



